

# 先勁血壓監測健康管理系統使用說明

## 內容

一.血壓監測健康管理系統主畫面說明.....	2
1.程式安裝說明 .....	2
2.首次進入說明 .....	4
3.如何進入血壓管理系統 .....	5
4.血壓管理系統主畫面 .....	8
5.查詢個人血壓紀錄畫面 .....	9
6.衛教文宣主畫面 .....	10
二.血壓監測健康管理系統使用說明.....	11
1..血壓量測 .....	11
2..新增修改會員 .....	15
3..查找與匯出功能 .....	16
4..衛教文宣 .....	17
5..通知設定 .....	18
三.血壓監測健康管理系統相關報表.....	19
1..相關報表 .....	19
2..血壓心跳參考表 .....	21
四.相關問題問與答.....	22


# 一.血壓監測健康管理系統主畫面說明

## 1.程式安裝說明

請在店主機安裝血壓管理程式，

先勁血壓監測健康管理系統請至先勁服務網下載中心

<http://www.sjen.com.tw/center/main03.asp> 下載

下載 (先勁血壓監測健康管理系統)右邊的 

下載檔案名稱爲〔先勁血壓監測健康管理系統.exe〕直接點擊兩下解壓縮  
解壓完後資料夾中包含下面必須需要安裝的程式




請依序安裝完下列程式

1. 必須先安裝 dotNetFx40\_Full\_x86\_x64
2. 執行 PR109010Setup 選 [執行] 安裝
3. 安裝 CRforVS\_redist\_install\_32bit\_13\_0\_5


### 1. 安裝 dotNetFx40\_Full\_x86\_x64



## 2. 執行 PR109010Setup 選 [執行] 安裝

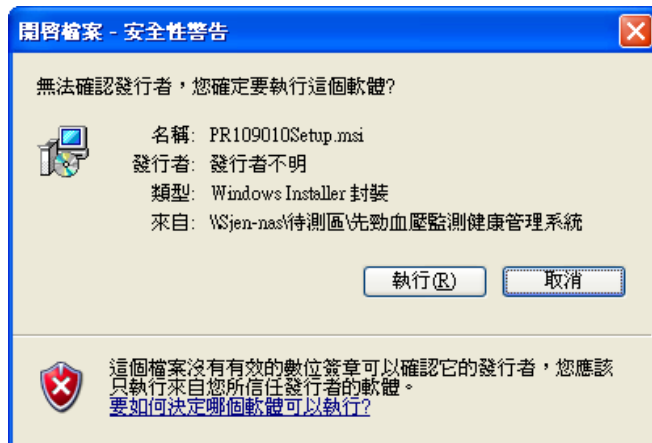

下圖跳出安裝畫面，確認安裝路徑後，選 [下一步] 至安裝完成。

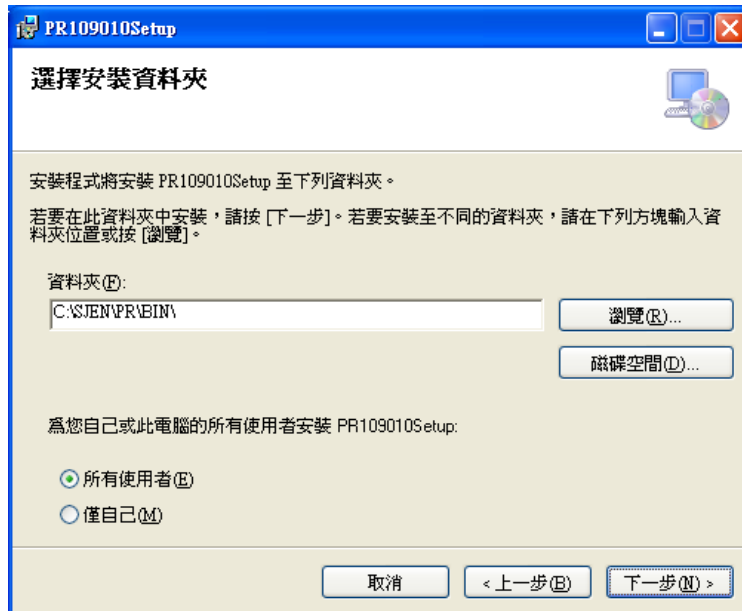


## 3. 安裝 CRforVS\_redist\_install\_32bit\_13\_0\_5

必須安裝 CRforVS\_redist\_install\_32bit\_13\_0\_5 才可開啓預覽列印畫面完成。

## 2.首次進入說明

請在店主機安裝程式，程式安裝完成後，  
進入先勁健保申報大師 → 血壓監測健康管理

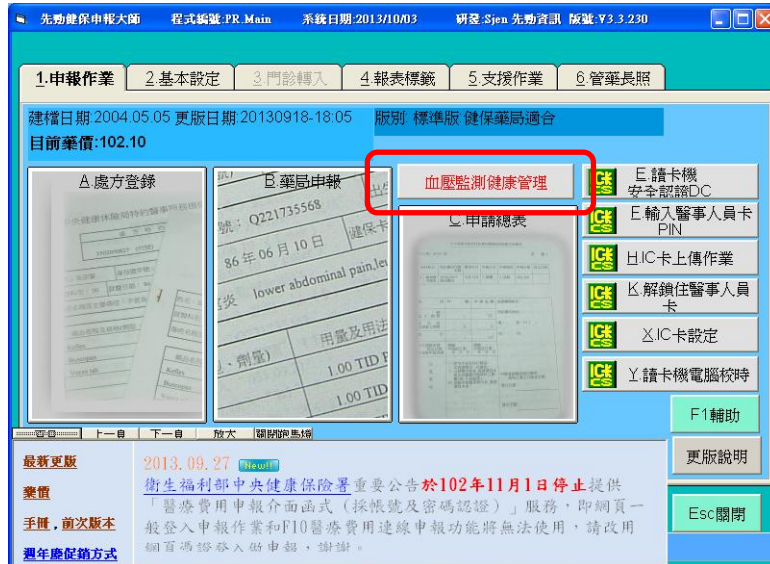

首次進入會跳出下圖

使用者請輸入：99

通行密碼可以不輸入，然後按 F12 確定進入下一步。


請直接按 F12 確定進入下一步。

請按 [是]，首次建立完成就可以正常使用了。


### 3.如何進入血壓管理系統

有五種方式可進入血壓監測健康管理系統

(1)先勁健保大師主畫面

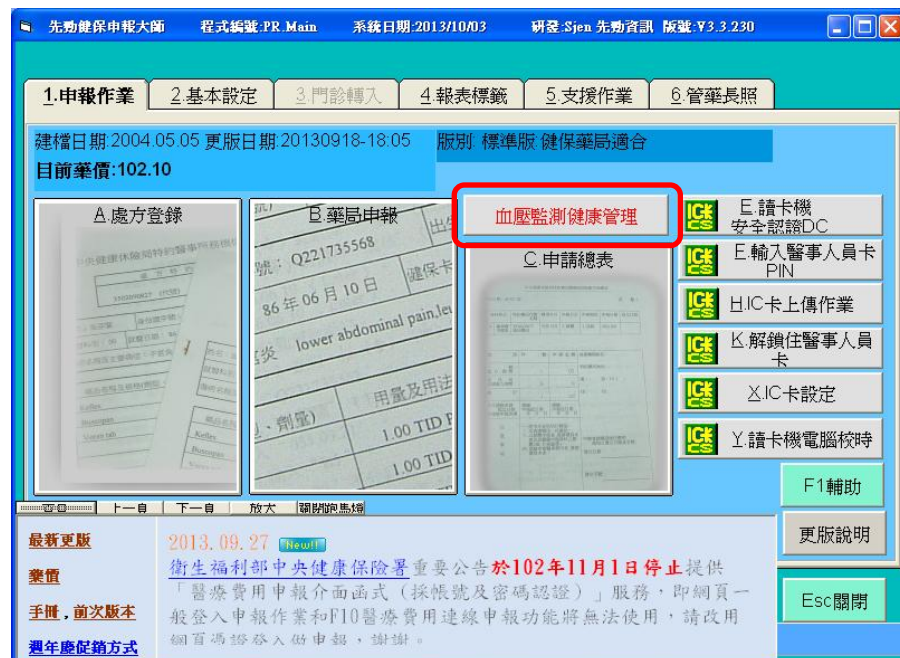

(2)先勁健保大師→處方登錄中，[血壓健康] 按鈕，點選後直接帶入畫面上該會員的血壓資料。

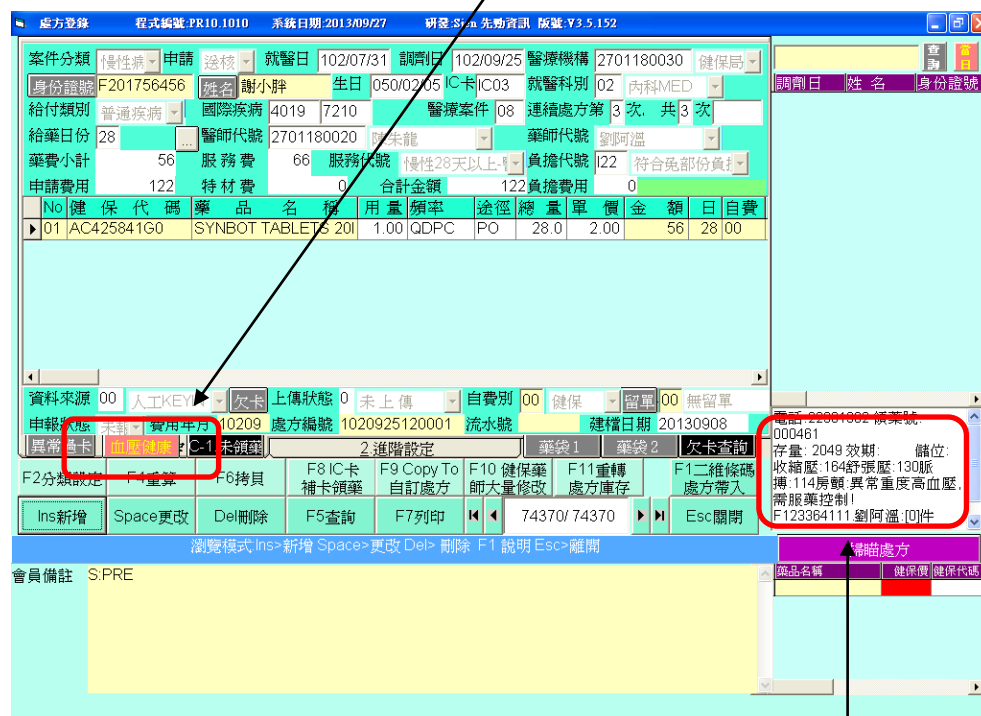

\* 此區會顯示該會員的血壓資料

(3)先勁門市大師 →門市銷售 → A+F8 其他作業→ E 血壓管理，若有帶入會員，可直接帶入該會員的血壓資料。

門市銷售 程式編號:PO10.1010 系統日期:2013/09/26 研登:Jen 先勁資訊 版號:V3.2.110

日期 20130909 發票 序號 00001 收銀 002 劉宗翰  
 會員 謝小胖 卡別 C 2310 台號 001 班別 1  
 22961962 點數 22 除欠 0 訂金 0 ... 359

No.	商品編號	品名	U	數量	單價	小計	說明
Name: 謝小胖 Birthday: 16/02/05 Tel: 22961962 BTel: Add: <<IC儲值餘額: 0,贈金: 0 >> S:PRE							

輸入區 總計 0 原價 0

1.加成	2.加價	3.發票號碼	4.特殊收費	5.櫃外收入	6.櫃外支出	7.商品管理	8.IC卡發卡	上鎖
9.IC卡儲值	0.IC卡管理	A.IC卡查詢	B.IC卡退儲值	C.處方登錄	D.健保用藥	E.血壓管理	Esc關閉	

請輸入:1.加成 2.加價 3.發票號碼 4.特殊收費 5.櫃外收入 6.櫃外支出 7.商品管理 8.IC卡發卡 9.IC卡儲值 0.IC卡管理 ?

(4)先勁健保大師 → 6 管藥長照 → B 長照系統 → I.住民用藥管理中，頁籤 5 血壓監測健康管理

住民用藥評估 程式編號:LA10.1030 系統日期:2013/09/26 研登:Jen 先勁資訊 版號:V3.1.67

案號 001 訪視藥師 N221095324 流水編號 2013052102001  
 評估日期 102/05/21 身分證號 F201756456  
 姓名 謝小胖 性別 男 出生日期 016/02/05 年齡 86歲

1 藥事服務需求評估 2 用藥狀況 3 目前藥物類別 4 藥品交互作用 5 血壓監測健康管理 6 諮詢藥師建議表

測量日期	時間	收縮壓	舒張壓	脈搏	心防顫動	就醫建議說明
20130926	1423	164	130	114	正常	重度高血壓,需服藥控制!
20130926	1422	162	133	110	正常	重度高血壓,需服藥控制!
20130926	1421	110	71	83	正常	血壓正常,脈搏偏快
20130926	1416	109	71	81	正常	血壓正常,脈搏偏快
20130926	1303	97	64	71	正常	低血壓,需服藥控制!
20130926	1301	94	66	63	正常	血壓正常,脈搏偏慢,需注意身體狀況
20130926	1152	110	74	72	正常	血壓正常
20130926	1140	110	70	71	正常	血壓正常
20130925	1547	140	102	77	正常	重度高血壓,需服藥控制!
20130925	1545	149	113	84	正常	重度高血壓,需服藥控制!

新增血壓監測健康管理

F2分類設定	F6持具	F8藥品交互作用	F10檢查重複用藥	F1輔助
Ins新增	Space更改	Del刪除	F5查詢	F7列印

1/1 Esc關閉

請輸入[姓名]

(5)先勁健保大師 → 6 管藥長照 → B 長照系統 → E 長照費用申報登錄中，  
F10 血壓健康管理系統。

長照費用申報登錄 程式編號: LA10.4010 系統日期: 2013/10/03 研發: Sjen 先勁資訊 版號: V1.0.24

1.基本 2.備用區

身份證號: T220933705 姓名: 申屏玉 生日: 060/01/05 日期: 102/09/26

申請: 送核 藥師代號: F123364843

服務代號: P4101C 一般地區訪視(1000) 山地資源不足(1200) 照顧機構住民(700)

服務費: 1,000 資料來源: [X] IC卡過卡異常 異常過卡 過卡時間: 102/09/26 上傳時間: / /

申報狀態: 未報 費用年月: 10209 處方編號: 10209261D0002 流水號: 建檔日期: 20130926

健康處方單號	流水碼	費用年月	姓 名	申請	案件	科別	調劑日期	身份證號	過卡	卡號	月份	藥費小計	初評訪視	初評姓 名	初評身份證號


複評訪視日 複評案號 複評服務

F2分類設定 F4重算 F6拷貝 F8IC卡補卡領藥 F9傳入健保處方登錄 F10血壓健康管理 F1輔助

Ins新增 Space更改 Del刪除 F5查詢 2/2 Esc關閉

瀏覽模式 Ins>新增 Space>更改 Del>刪除 F1說明 Esc>離開

## 4.血壓管理系統主畫面

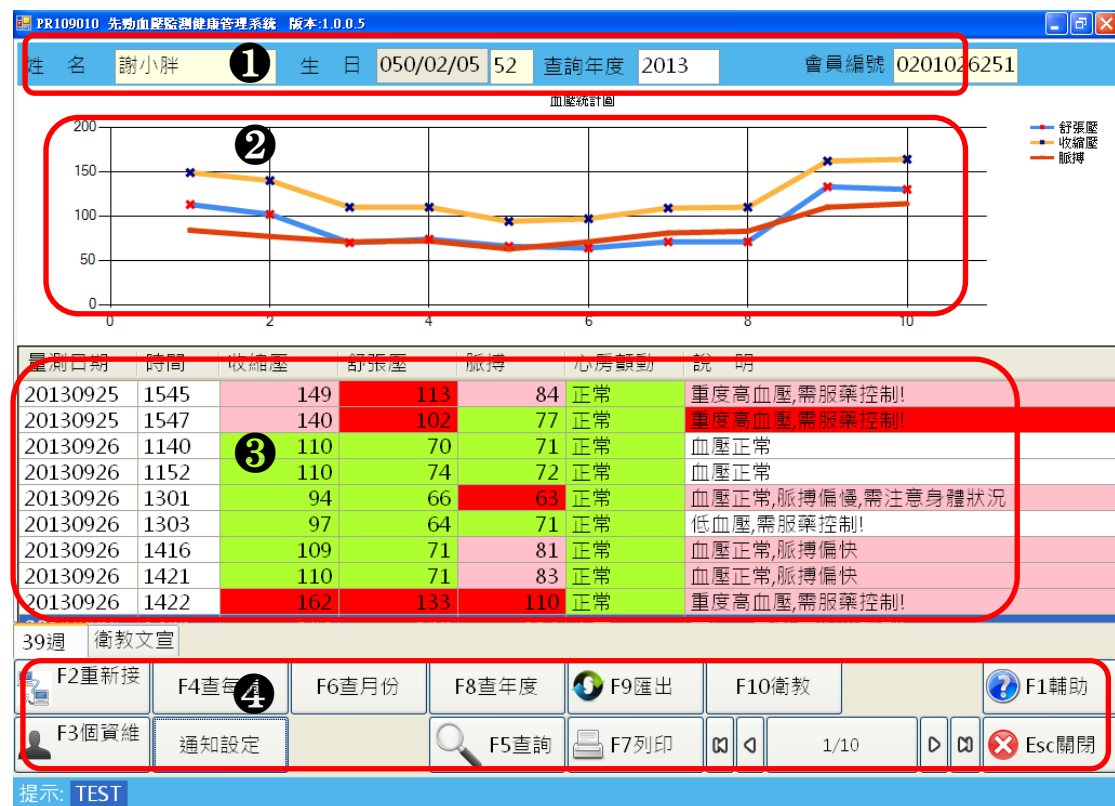

① 基本資料顯示區：顯示測量者基本資料

② 圖表顯示區：顯示測量者量測結果圖表

③ 數據顯示區：顯示測量者量測數據結果

④ 功能鍵區：F2 重新接收：點選後開始接收血壓機量測資料

F4 查每週：查看每週量測紀錄

F6 查月份：查看每月量測紀錄

F8 查年度：查看年度量測紀錄

F9 匯出：將資料匯出成 Execl 表格

F10 衛教文宣維護：新增編輯修正衛教文宣資料

F3 個資維護：連結至會員管理，編輯修正維護個人資料

通知設定：設定以簡訊信箱方式通知提醒數值異常或忘記量等

F5 查詢：依輸入條件查找會員

F7 列印：列印相關報表(如血壓紀錄表)

Esc 關閉：關閉離開



## 5.查詢個人血壓紀錄畫面

會員編號	姓名	性別	簡碼	身分證號	生日	連絡電話	地址	備
0200000001	王先生	男性		A1234567...	050/05/...			止嗽粉
0200000865	王先生	男性	J		//			20050
0200001056	王先生	男性	JVG		//			
0200002436	王先生	男性	J		//			強百力
0200002475	王先生	男性	J		//		台北縣五股鄉	2
0200007589	王先生	男性	J		//			備鎮心
0200007706	王先生	男性	JVG		//			20041
0200008900	王先生	男性	J		//			
0201003157	王先生	女性	JVG		//			
0201003186	王先生	男性	JVG		//			
0201004642	王先生	女性	jq		//			
0201005610	王先生	女性	JVG		//			
0201006110	王先生	女性	jq		//			
0201007767	王先生	女性	jq		//			
0201008220	王先生	女性			//			

- ❶ 查詢資料輸入區：將想查詢的資料填入空格，輸入空格中即可。  
如：姓名欄位輸入 王先生 或 簡碼欄位輸入 JVG
- ❷ 查詢結果顯示區：顯示輸入條件的查詢結果，最多呈現 30 筆資料。
- ❸ 功能鍵區：查詢：查詢會員資料  
修改：修改會員資料，直接輸入，完成後 F12 確定即可  
新增：新增會員資料，直接輸入，完成後 F12 確定即可  
刪除：刪除會員資料
- ❹ 確定關閉：F12 確定：資料輸入完成或選取好後確定帶入  
Esc 關閉：關閉離開

## 6.衛教文宣主畫面.

血壓監測衛教文宣維護 程式編號: PR109010 系統日期: 2012/10/13 上午 12:00:00 帳號: 8100 光碟目錄: 光碟目錄

No	標題
001	TEST
003	認識腎臟病
004	我有高血壓嗎?

編號 0003 標題 認識腎臟病 1 ☐ 是否印出

認識腎臟病 - 「醫師! 最近健康檢查發現我有高血壓、腎功能又不好, 會不會需要洗腎啊?」

腎臟可說是人體的血液淨化器官, 腎臟會負責過濾血液中的廢物與過多的液體, 經由製造尿液及排泄機能, 清除體內新陳代謝產生的有毒廢物。另外, 腎臟也會釋放腎素及血管張力素, 進而調節血壓。

2

腎臟病與高血壓的關係?

「我發現你的血壓長期偏高, 連腎臟功能都開始損害了喔!」

「怎麼會這樣? 醫師我的病因到底怎麼引起的啊?」

腎臟病和高血壓常同時發生, 不過很難確定到底是腎臟病引起高血壓或是高血壓併發腎臟病。

當腎臟受損時, 腎臟釋放腎素及血管張力素以調節血壓的功能也同時下降, 因此血壓持續偏高是腎臟病友常見的臨床症狀之一。而高血壓又會破壞腎臟小血管, 導致腎臟病變, 甚至加速腎臟受到損害的程度, 兩者形成惡性循環。

※嚴格控制血壓, 可說是保護腎臟的第一步。

3

4

Ins新增 Spece更改 Del刪除 F5查詢 F7列印 3/3 Esc關閉

① 文宣標題輸入區：輸入編號和文宣標題。

如：0001 認識高血壓

② 文宣內容輸入區：輸入文宣內容

③ 文宣選單：已鍵入的衛教文宣，可在這邊選看

④ 功能鍵區：Ins 新增：新增衛教文宣

Spece 更改：更改修正衛教文宣標題或內容

Del 刪除：刪除衛教文宣

F5 查詢：


F7 列印：

Esc 關閉：關閉離開


## 二.血壓監測健康管理系統使用說明

### 1. 血壓量測


先確認機器是否有接好，血壓機電源接好、USB 傳輸線與電腦有接好，  
確認完後開啓先勁健保申報大師 → 血壓監測健康管理  
進入主畫面後，跳出[找不到量測者資料]，按確定，

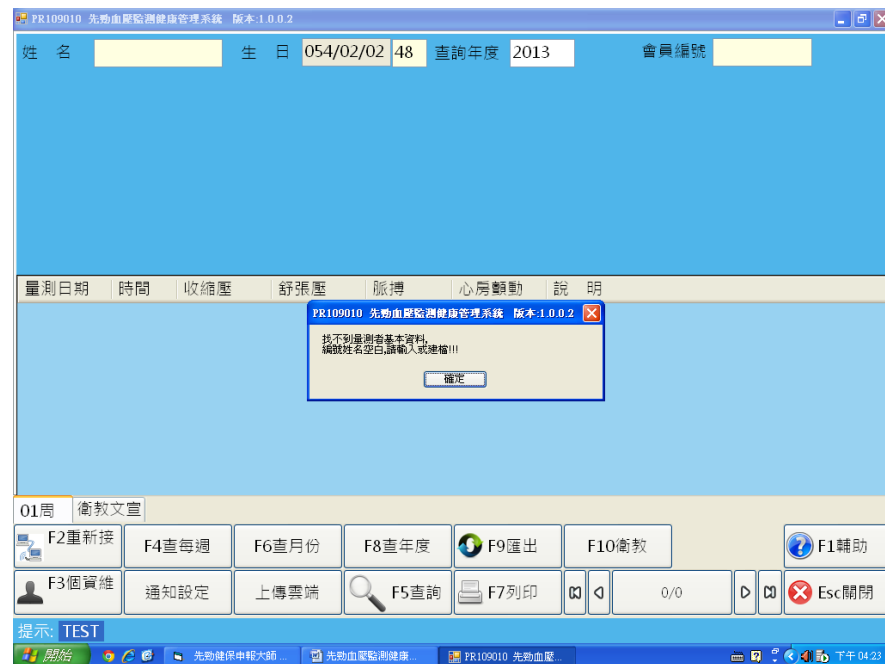

先選 F5 查詢，帶入要量測的會員資料，有兩種方式查詢：

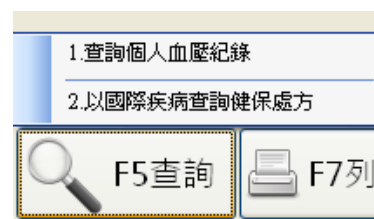

(1)查詢個人血壓紀錄：在上方空白處輸入條件後，系統自動找出條件相符的資料，在資料中選取後，選 F12 確定即可帶入該會員資料。

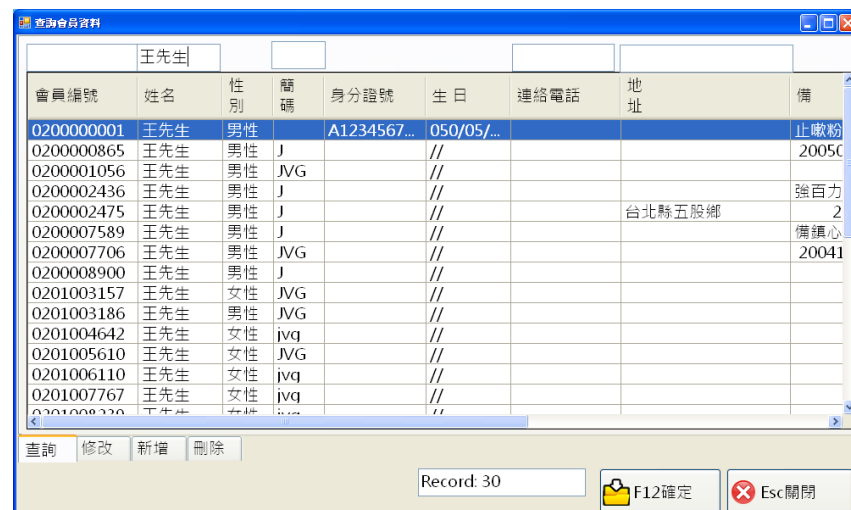

(2)以國際級並查詢健保處方：勾選要尋找的疾病代碼和日期區間後按 **F12** 確定，系統自動找出條件相符的資料，選 **F12** 帶入會員即可帶入該會員資料。

**以國際疾病查詢健保處方**

高血壓相關疾病代碼ICD9

- ☐ 401-405高血壓疾病
- ☐ 410-414缺血性心臟病
- ☐ 420-429其他形態心臟病
- ☒ 440-448動脈、小動脈及毛細血管疾病
- ☐ 436診斷欠明之急性腦血管疾病
- ☐ 437其他及診斷欠明之腦血管疾病
- ☐ 438腦血管疾病後期影響
- ☐ 458低血壓

日期區間

民國年月  ~ 民國年月

**F12確定** **Esc關閉**

---

**以國際疾病查詢健保處方**

找出相關高血壓患者資料

身分證	姓名	電話	大哥大	生日
C	呂	2		0450
F	盧	2		039041
F	朱			0440
F	張	2		056071
F	林	C		0690
F	鍾	2		099021
F	錢	C		0160

健保代號	藥品名稱	劑量	頻率	服法	總量
AC4413...	PLETAAL TA...	2	BIDAC	PO	
B02535...	LIVALO TAB...	1	QN	PO	

**F12帶入會員** **Esc關閉**

帶入會員後，按下 **F2** 重新接收，跳出下圖血壓機畫面，即可開始量測血壓，

PR109010 先動血壓監測健康管理系統 版本:1.0.0.1

姓 名  生  身分證  會員編號

量測日期 時間 收縮壓

接收血壓機訊號...請稍候!!!

microlife

05


WatchBP home

01周 衛教文宣


**F2重新接** **F4查每週** **F6**

**F3個資維** 通知設定 上傳公報

**Exit** **F1輔助** **Esc關閉**

點選血壓機的  按鈕，至下圖畫面後，等待開始量測。



量測時，會量三次取平均值，若想停止請再按一次  按鈕  
等待量測數據回傳至血壓機畫面，繼續等待

**\*請勿點選 Exit 離開，數據圖表會無法產生**



並等待血壓機畫面自動消失，系統自動產生數據和圖表，完成。



## 2. 新增修改會員

### (1) 新增會員：

F5 查詢→1.查詢個人血壓紀錄，點選新增，將資料輸入後按 F12 確定即可。  
(會員編號不用輸入，確定存檔後自動產生)

查詢會員資料

會員編號

會員姓名  身分證

密碼  卡別

電話1  電話2

大哥大  生日

備註

查詢 修改 **新增** 刪除

Record: 30

F12確定 Esc關閉

### (2) 修改會員：

a.F5 查詢→1.查詢個人血壓紀錄，先輸入查詢條件，點選到要修改的會員，

查詢會員資料

會員編號	姓名	性別	密碼	身分證號	生日	連絡電話	地址	備
0200001619	TEST	女性	TES	A1234567...	//	0955692297		姓名補
0201021064	池	女性	tea	E	024/07/...			S.PRE
0201018098	池	女性	TEF		//	2900		
0200004993	沈	男性	TES		//	2305		卡洛塔
0201020547	長	女性	teum		//	2410		沛怡同
0201013667	常	女性	tecr	A	036/02/...	2297		S.PRE
0200004987	陳	女性	Te5		//	2296		大便公
0201004305	陳	男性	TEQ		//			
0201018240	陳	女性	TEX		//	2909		
0201006732	陳	男性	tec	F	059/01/...			S.PRE
0200003290	陳	男性	TEA		//	2296		桂格乳
0201004345	陳	男性	tea	A	039/04/...	2909		S.PRE
0201014075	陳	男性	TEU		//			
0200005891	陳	男性	TEV		//	2901		蕭必克
0200007337	陳	男性	TEW		//	2900		上格文

查詢 修改 **新增** 刪除

Record: 30

F12確定 Esc關閉

b.再點選修改，將資料輸入後按 F12 確定即可。

查詢會員資料

會員編號

會員姓名  身分證

密碼  卡別

電話1  電話2

大哥大  生日

備註


查詢 修改 **新增** 刪除

Record: 30


F12確定 Esc關閉

### 3. 查找與匯出功能


(1) 如想查看某會員的歷史數據圖表，先 F5 查詢帶入該會員資料，再依需求選擇

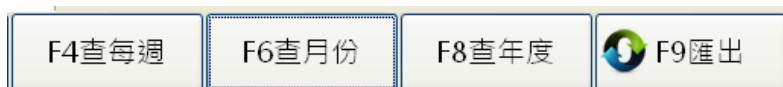


F4 查每週：查看每週量測紀錄

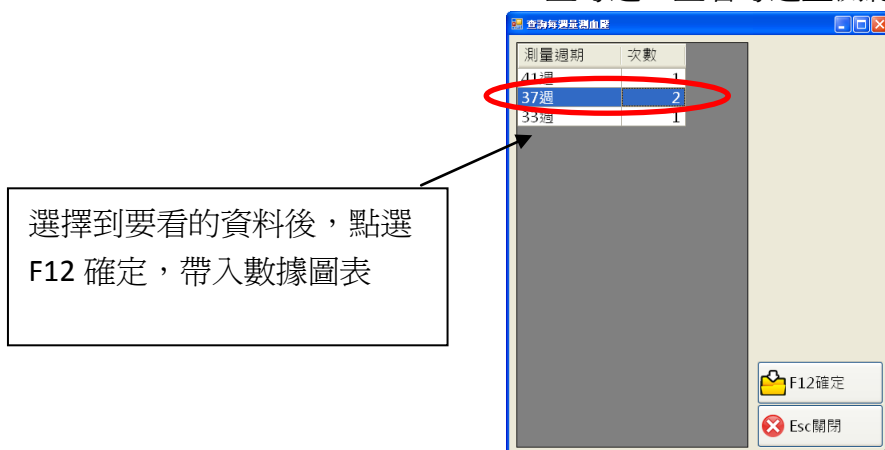



F6 查月份：查看每月量測紀錄

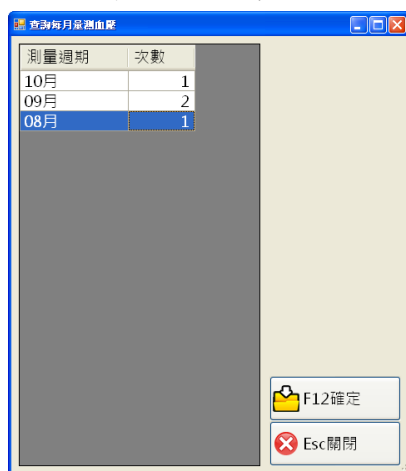

F8 查年度：查看年度量測紀錄

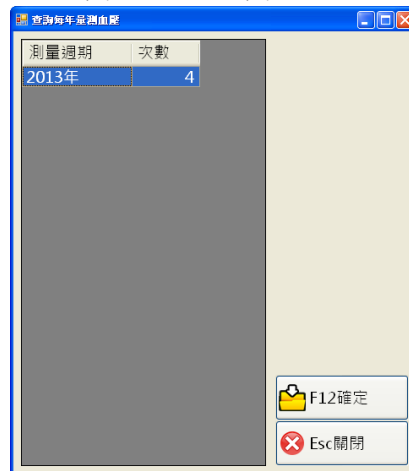

(2) 如想將資料匯出，先 F5 查詢帶入該會員資料，之後按 F9 匯出，輸入日期與匯出位置路徑後，點 F12 確定即可

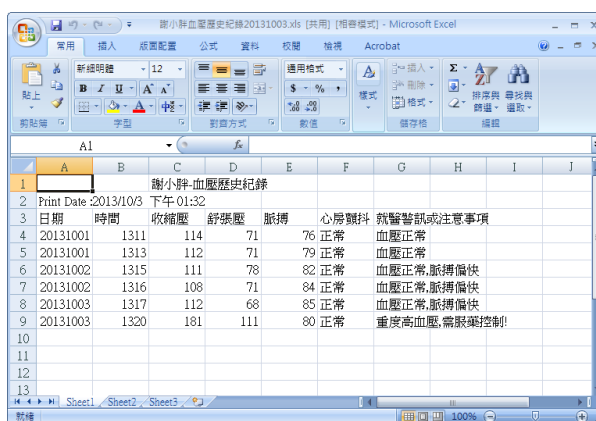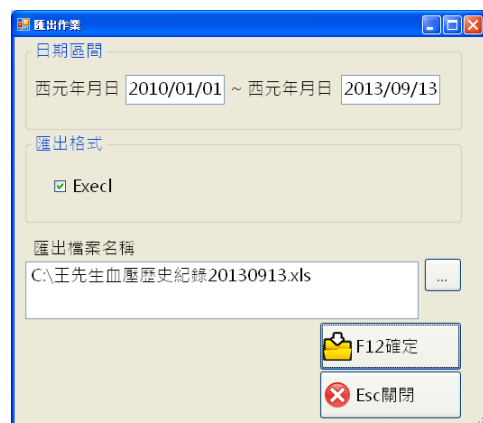



## 4. 衛教文宣

開啓先勁健保申報大師→血壓監測健康管理

(1)新增衛教文宣：

進入 F10 衛教，點選 ins 新增

輸入標題和文宣內容後，F3 存檔即可。

(2)更改衛教文宣：

在畫面左方選單區，先點選要修改的文宣，再點選 Spece 更改  
修正完成後，F3 存檔即可。

(3)刪除衛教文宣：

在畫面左方選單區，先點選要刪除的文宣，再點選 Del 刪除  
跳出確認刪除視窗，點選 [是] 即刪除。

血壓監測衛教文宣維護 程式編號:PR109010 系統日期:2012/10/12 上午 12:00:00 研發:Jjen 先勁資訊 版別:Y1.0.0.2

No	標題
0001	TEST
0003	認識腎臟病
0004	我有高血壓嗎？

編號: 0003 標題: 認識腎臟病 ☐ 是否印出 順

認識腎臟病 - 「醫師！最近健康檢查發現我有高血壓、腎功能又不好，會不會需要洗腎啊？」

腎臟可說是人體的血液淨化器官，腎臟會負責過濾血液中的廢物與過多的液體，經由製造尿液及排泄機能，清除體內新陳代謝產生的有毒廢物。另外，腎臟也會釋放腎素及血管張力素，進而調節血壓。

腎臟病與高血壓的關係？

「我發現妳的血壓長期偏高，連腎臟功能都開始損害了喔！」

「怎麼會這樣？醫師我的病因到底怎麼引起的啊？」

腎臟病和高血壓常同時發生。不過很難確定到底是腎臟病引起高血壓或是高血壓併發腎臟病。

當腎臟受損時，腎臟釋放腎素及血管張力素以調節血壓的功能也同時下降，因此血壓持續偏高是腎臟病友常見的臨床症狀之一。而高血壓又會破壞腎臟小血管，導致腎臟病變，甚至加速腎臟受到損害的程度，兩者形成惡性循環。

※嚴格控制血壓，可說是保護腎臟的第一步。

Ins新增 Spece更改 Del刪除 F5查詢 F7列印 3/3 Esc關閉

提示:

## 5. 通知設定

此功能可設定以簡訊或信箱的方式，在量測血壓數值異常或忘記量測時，自動發送通知提醒。

### ① 建置通知設定傳送人的基本資料

上方頁籤：可設定量測者資料和家人親屬 1~4 名。

基本資料：輸入[手機號碼] [收信人] [Email]。

### ② 建置通知設定傳送內容資料

通知警語：設定要重送的提醒內容。

鬧鐘設定：此功能為雲端系統功能

設定定時量測時間，時間到了未量傳送提醒通知。

資料輸入完成後，F12 確定就可以了。


當量測數值異常或超過量測時間時，系統將會自動發送 Email 通知。



### 三.血壓監測健康管理系統相關報表

#### 1. 相關報表


列印功能中的報表有 4 種，可依需求選擇。

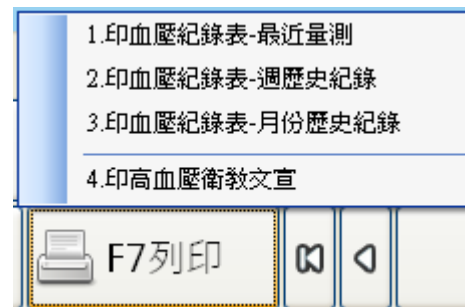


先開啓先勁健保申報大師 → 血壓監測健康管理

進入主畫面後，按 F7 列印，選擇要列印的條件後(如 3 月份歷史報表)，產生預覽畫面，點選[Print]列印。


#### 1. 印血壓記錄表-最近量測

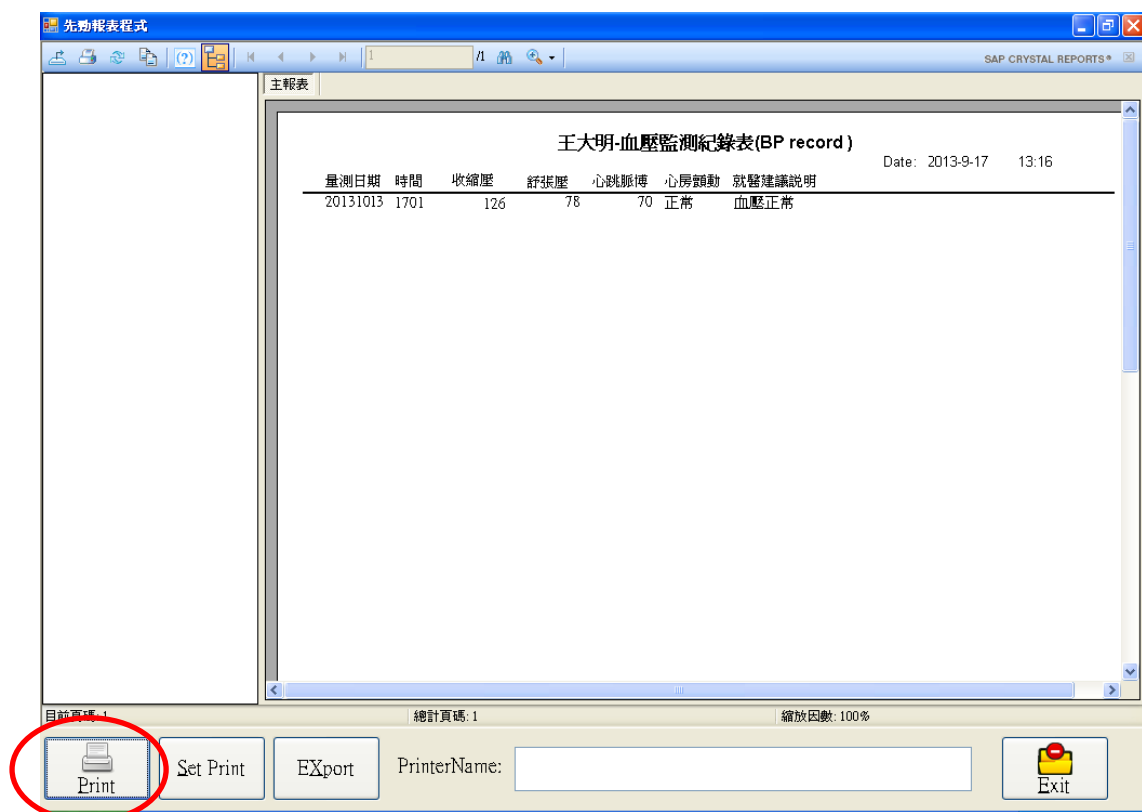


## 2.印血壓記錄表-周歷史紀錄

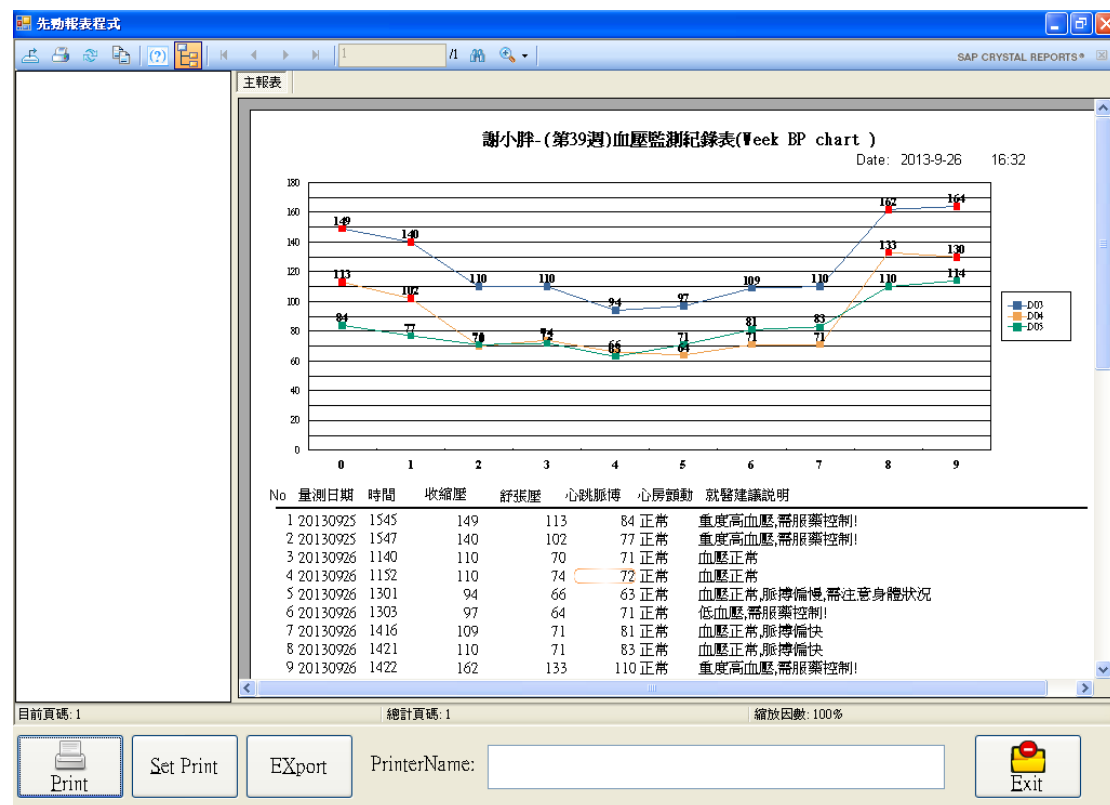

## 3.印血壓記錄表-月份歷史紀錄

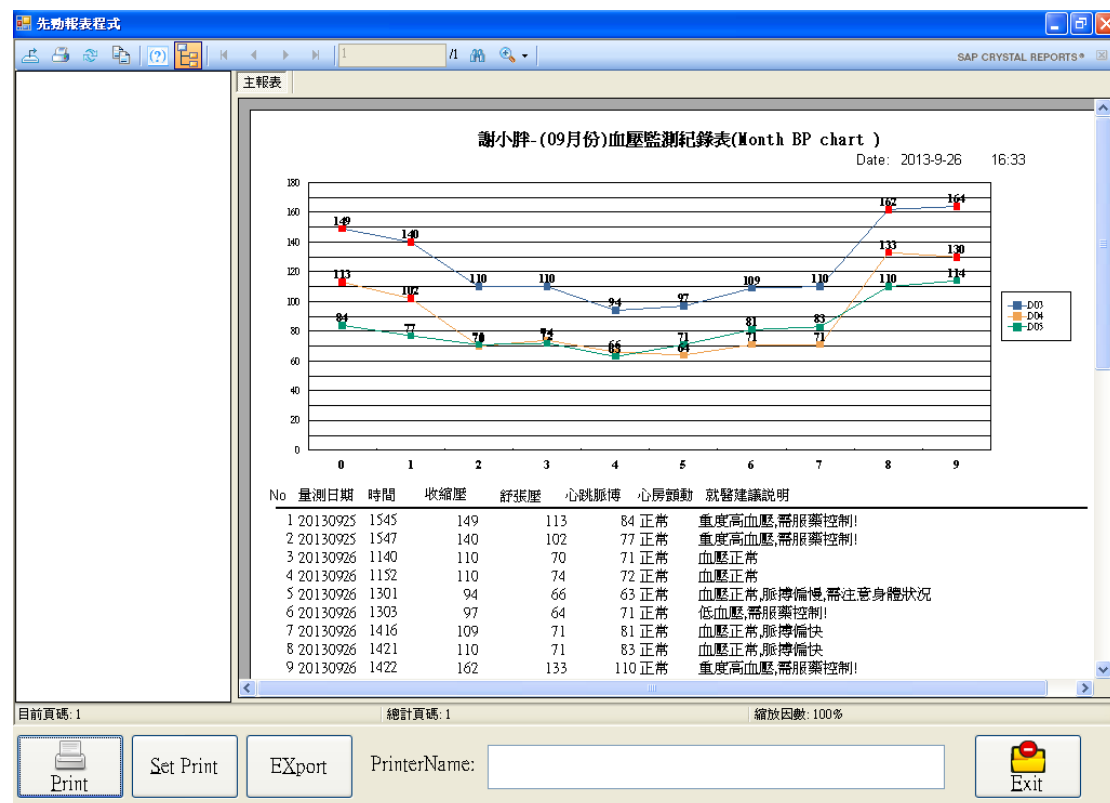

## 4.高血壓衛教文宣

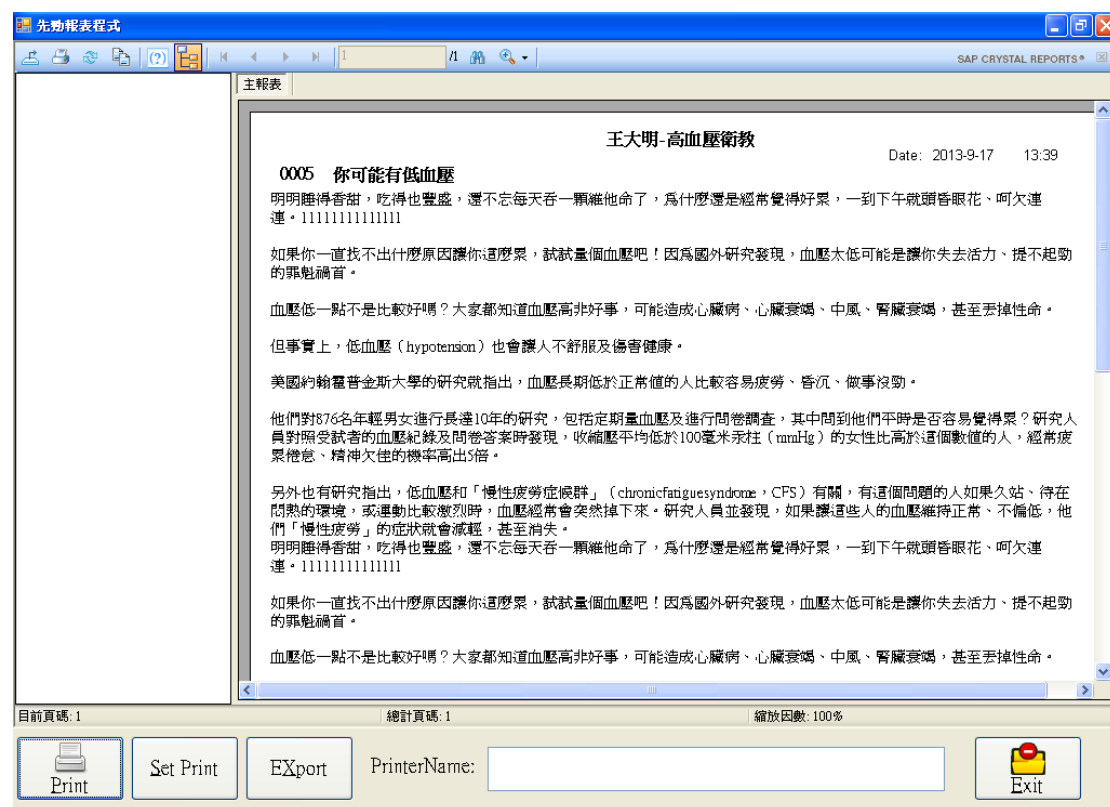

## 2. 血壓心跳參考表

血壓參考表		
	收縮壓	舒張壓
低血壓	小於 99	小於 65
正常	100-129	66-85
正常偏高	130-139	86-90
輕度高血壓	140-159	91-95
中度高血壓	160-179	96-100
重度高血壓	大於 180	大於 101

心跳頻率參考表	
跳動頻率	結果判讀
小於 64	偏慢
65-80	正常標準值
80-95	偏快
大於 96	太快

## 四.相關問題問與答

Q1:為何我量測血壓時，數據一直沒有顯示在電腦上?


A:1.請確認血壓的 USB 線與電腦有連接好

點擊畫面下方 WatchBP 接收程式可看到接收狀態，如下圖

2.請確認有點 [F2 重新接收] 跳出血壓機接收畫面

3.請確認畫面下方是否有 WatchBP 接收程式

若沒看到或不小心被關掉了，請重新點 [F2 重新接收] 開啓

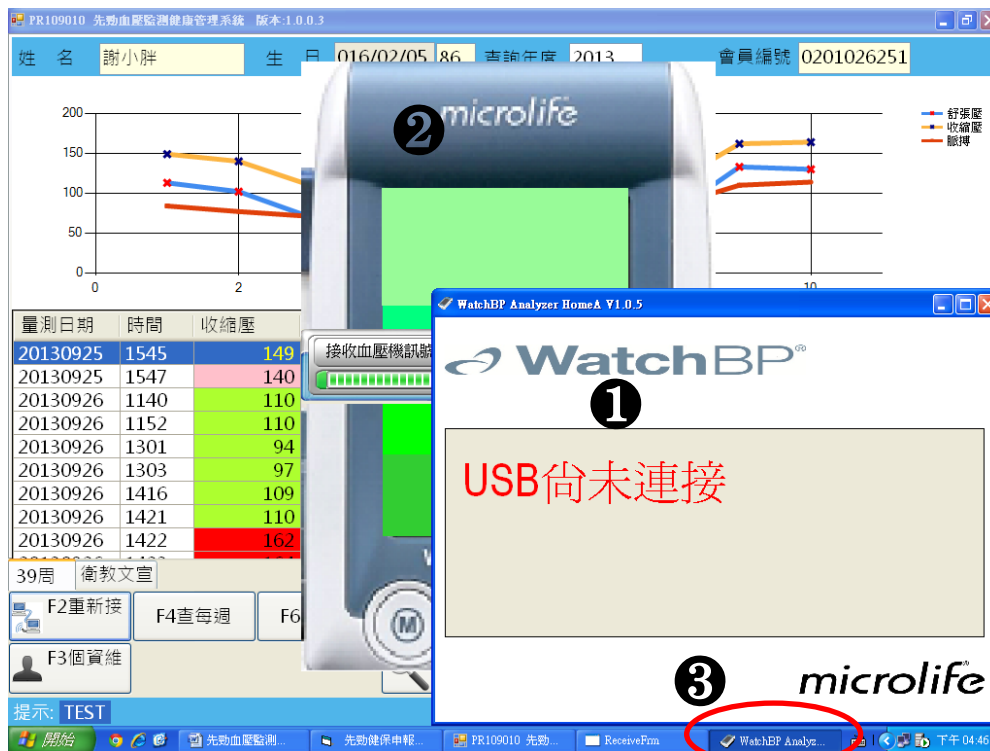

Q2:為何我匯出了血壓記錄表，點檔案卻開不起來?

A:請確認電腦是否有安裝可開啓 Execl 檔案的程式

如 Microsoft Office、Open Office...等

Q3:為何血壓量完後，血壓機沒有顯示數據?

A:請再重新量測，若發生頻率太高，請洽

百略醫學科技股份有限公司

台北市 114 內湖區瑞光路 431 號 9 樓

Tel. +886 2 8797 1288

Fax. +886 2 8797 1283

Q4:請問血壓機該如何校驗?

A:請洽

百略醫學科技股份有限公司

台北市 114 內湖區瑞光路 431 號 9 樓

Tel. +886 2 8797 1288

Fax. +886 2 8797 1283